



2024年 測定機ラインナップ°



密度計・比重計・濃度計



粘度計



オートサンプラー



旋光度計

屈折率計



ラマン分光計



FTIR

ハイエンドモデル DMA4101/ DMA4501/ DMA5001



- 浮標、比重瓶よりも少サンプル(約1 ml)、自動温調で測定時間を短縮
- サンプラーや他の当社計測機とフロー接続が可能(オプション)
- 測定セル全長のライブカメラと自動気泡・異物検出サポート機能搭載
- 粘度補正+気泡検出した小数点4桁の密度を約20秒で測定

機種名	精度(Accuracy)	2024年価格
DMA4101	0.000 1g/cm ³	¥ 2,380,000
DMA4501	0.000 05g/cm ³	¥ 2,980,000
DMA5001	0.000 005g/cm ³	¥ 4,490,000

日本薬局方
準拠

D.I.

コンパクトモデル DMA501/ DMA1001



- 省フットプリント (約A4サイズ) で場所を取りません
- 吸引ポンプのドッキングが可能 (オプション)
- ルーティン測定に特化したスマートな性能
- ハイエンドモデル同様の機能も多数

機種名	精度(Accuracy)	温度範囲	2024年価格
DMA501	0.001g/cm ³	15~40℃	¥ 990,000
DMA1001	0.000 1g/cm ³	15~60℃	¥ 1,400,000

日本薬局方
準拠

D.I.

ポータブルモデル DMA35シリーズ



DMA35 ¥199,000~

DMA35 Ex
DMA35 Ex Petrol
¥540,000~

- ピペットのように液を注入する簡単な操作構造
- 実温測定または温度換算測定が可能
- 密度、比重だけでなく濃度テーブルも内蔵
- 乾電池で稼働するため電源不要
- 密度精度0.001 g/cm³のため浮標をデジタル化

DMA35 Ex/ DMA35 Ex Petrol
ATEX、IEC及び国内の本質安全防爆規格を取得済み

密度・音速計 DSA5000M




- 3成分濃度の測定可能
 - 濃硫酸・発煙硫酸の濃度測定
 - 圧縮率、体積弾性率の測定
- 2024年価格 ¥5,740,000

高温・高圧金属セル DMA4200M



- ハステロイ製測定セル内蔵ラボ用
 - 塩基(例：フッ酸など)も測定可能
 - 温度200℃、圧力500Bar
- 2024年価格 ¥5,610,000

高温・高圧金属性 外部セル DMA-HPM

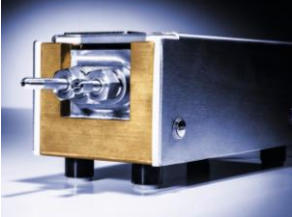

- ハステロイ製測定セルが制御部と分離
 - フローでの測定が可能
 - 温度200℃、圧力1400bar
- 2024年価格 ¥2,980,000

ご用途に合わせてサンプラー生産性を高める Xsampleシリーズ + ラボ用データ集中管理ソフト



単検体サンプル測定			マルチサンプル測定用		加温測定用
共洗い方式	自動洗浄(+自動乾燥)	自動洗浄乾燥	共洗い方式	自動洗浄乾燥	
～低粘度		常温型 ～高粘度	～低粘度	常温型 ～高粘度	～超高粘度




PCまたはSQLサーバーにインストールし、機器データを全て一元管理し、必要なデータだけをファイル転送。ペーパーレス化が可能です。

粘度計




動粘度計 SVM x001/SVM 1x01 シリーズ

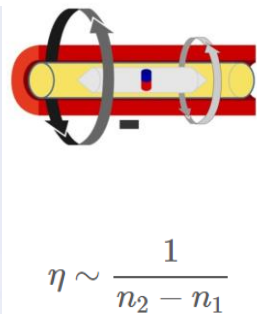

- ガラス細管式に代わる新しい粘度計
- 絶対粘度と密度から動粘度も算出可能
- 幅広い測定レンジ 0.3 ~ 30,000 mPa・s (SVM3001の場合)
- 機能を限定した廉価版SVM 1x01シリーズ
- シリンジで充填+スタートボタンの簡単操作
- 準密閉で高再現性、サンプラーも接続可能
- オプションで曇り点・析出点の測定可 (SVM 3001の場合)
- ペルチェで-60~135℃に温調可能 (SVM 3001の場合)

2024年価格 ¥4,980,000 ~ (SVM3001)

落球式粘度計 Lovis 2000M/2000ME

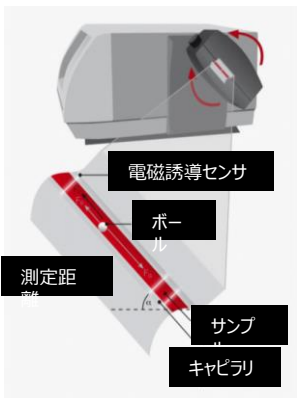


- 希少なサンプルに最適！最小 0.1ml ~
- 特に低粘度に真価を発揮/密閉測定
- ペルチェで自動温度調節
- 極限粘度プログラム装備
- マイナス温度での仕様あり (オプション)
- オートサンプラー/振動式密度計とのドッキング
- PCTFEキャピラリー・金メッキボールで耐薬品に対応
- 充填方法は手動フィリングまたはフロースルーフィリング



2024年価格 ¥2,180,000 ~ (Lovis 2000ME)

回転粘度計 (B型粘度計) ViscoQC+PTD80/175

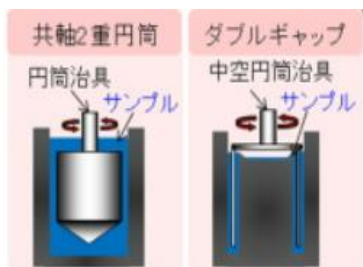

D.I.


日本薬局方
準拠

回転粘度計 (B型粘度計) 高温・高粘度用 ViscoQC+ETD300



- Toolmaster™機能：ICチップでスピンドルを自動認識
- マグネット脱着式のスピンドルによってモーター破損リスク低減
- レベルセンサ搭載、水平のズレを測定前に警告
- ペルチェ温調による素早く正確な温調を実現 (PTD80/100/175)
- 電熱温調による高温・高粘度測定に対応 (ETD300)
- 非流動性サンプルに最適なヘリックスモード (Heli-Plus装着時)
- 粘度カーブの取得可能 (V-Curveオプション、ViscoQC300のみ)
- 21CFR Part11モード対応 (V-Complyオプション、ViscoQC300のみ)
- 自動でギャップ調整可能 (E型粘度計のみ)

回転粘度計 (E型粘度計) ViscoQC +PTD100

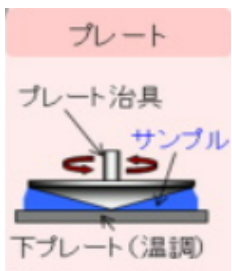

D.I.

日本薬局方
準拠

B型粘度計	測定範囲 [mPa・s]	2024年価格
ViscoQC300	L : 1~6M (L1の下限15mPa・s) R : 10~40M (RH1の下限100mPa・s)	¥950,000~
ViscoQC100	H : 60~320M (RH1の下限800mPa・s)	¥450,000~

E型粘度計	測定範囲 [mPa・s]	2024年価格
ViscoQC300	L : 0.1~928.9K (0.2~92.8K) R : 1.3~9.9M (1.6~991.1K)	¥1,900,000~
ViscoQC100	H : 10.6~79.2M (13.2~7.9M)	¥1,400,000~



回転式レオメーター RheolabQC

- 機器単体でのシングルポイント測定
- レオメータと共通ソフトで本格的レオロジー測定
- ペルチェで0~180℃に温調可能
- 測定治具の固定が簡単なQuickConnectカップリング
- Toolmaster™機能：ICチップでスピンドルを自動認識

2024年価格 ¥1,780,000~ (RheolabQC/standard stand)

屈折率計、旋光度計、分光計



多波長自動アッベ式 屈折率計




Abbemat MW



固体測定治具

屈折率の波長 / 温度分散

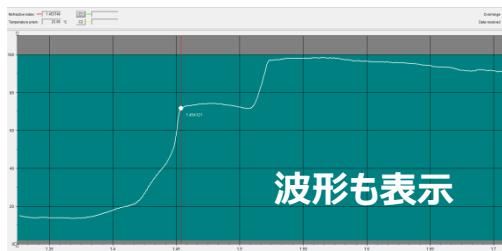

- ペルチエ素子で温度調節が自在(10~70℃)
- 液体はもちろん、フィルムは平面が出ていればOK！前処理が楽に
- 波長・温度の変更は専用ソフトからワンクリック
- 589.3nm+Max7波長搭載可能(435~780nm程度)
- 広い測定範囲1.30~1.72 nD

2024年価格 ¥4,200,000~

超コンパクト デジタルアッベ屈折率計



- 超コンパクト
- 簡単ふき取り

Abbemet 3X00

2024年価格
¥850,000 ~

スタンダード アッベ屈折率計



Abbemet 550/350



T-Check™
温度校正

D.I.

日本薬局方
改訂USP831準拠

2024年価格
350: ¥1,840,000-
550: ¥2,410,000-

超コンパクト 旋光度計



MCP 150 2024年価格 ¥2,290,000-



石英標準



- 温度・データを無線転送

日本薬局方
改訂USP781準拠

D.I.

ベンチトップラマン分光計 CORA5001



Cora5001

2024年価格 ¥7,140,000 ~

Directモデル

Fiberモデル

▶ スタンドアロンで



カーボン材料分析
非破壊・容器越し

バッテリー搭載

バッテリーなし

▶ In-Situ レオメータと



レオロジーと化学構造変化
結晶化過程モニタリング ~300℃

単波長

2波長

532nm

785nm


1064nm

- Direct: 本体内に試料を置き自動フォーカス
- Fiber: プローブを対象に近接させ測定

▶ In-Situ マイクロ波合成と



出発物質の監視・中間体の検知
終点の最適化

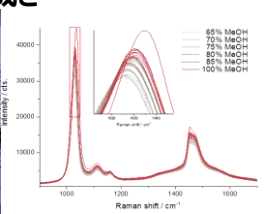

FTIR分光計 Lyza7000



2024年価格 お問い合わせ下さい



- 10.1 inch タッチスクリーンを搭載
- スマホライクで親しみやすい操作性
- 操作手順はソフトのガイダンスがご案内
- ステータスを表示するLEDライトがバックグラウンド再取得などを一目瞭然



- 高性能乾燥カートリッジでコアパートを保護
- 堅固な固定アライメントで振動による影響を抑制
- モジュール化セルをかんたん取り替え



Lyza7000 使用油向けパッケージ

- 各種ASTM規格準拠
E2412・D7214・D7412・D7414・D7415・
D7624・D7844・D7418
- 専用メソッド + 透過セル

抜群の使いやすさを実現

- 安心の3年保証
- 品質管理に最適
- 多彩なライブラリを用意
- メソッドを自由に作成可能

And More...
We Measure The World.



コスモトレーディング株式会社

本社
大阪市淀川区西中島 5-5-15 新大阪セントラルタワー
TEL: 06-6309-3578 / FAX: 06-6309-3638

名古屋支店
名古屋市中村区名駅南 1-17-29 広小路ESビル
TEL: 052-565-4410 / FAX: 052-571-7053
Mail: info@cosmotrading.co.jp

<https://www.cosmotrading.co.jp>

株式会社アントンパール・ジャパン

東京本社

〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田 1階
TEL: 03-4563-2500

大阪営業所

〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-4-17 箕面千里ビル 8階
TEL: 050-4560-2100

E-Mail info.jp@anton-paar.com